



INTENDED USE

The BIONOTE Vcheck cPL 2.0 is an *in vitro* diagnostic test kit for the quantitative measurement of canine pancreas-specific lipase concentration in canine serum. Since the kit provides quantitative measurement of canine serum pancreas-specific lipase levels, BIONOTE Vcheck cPL 2.0 can be tested with every dog presenting with vomiting, anorexia or abdominal pain to diagnose pancreatitis. The BIONOTE Vcheck cPL 2.0 is designed to be used only by veterinarians.

PRINCIPLE

The Vcheck cPL 2.0 Test kit is a fluorescent immunoassay for the quantitative measurement of canine pancreas-specific lipase concentration. The Vcheck cPL 2.0 Test kit uses specific anti-cPL antibodies that bind to cPL. When the specimen is applied to the sample hole of the test device, cPL in the specimen migrates along the nitrocellulose membrane and forms the complexes with anti-cPL antibodies coated on the membrane. As the result, the fluorescence density of the test line reflects the concentration of pancreas-specific lipase in canine serum and plasma. The BIONOTE V check Analyzer reads the density of this test line and calculates the canine pancreas-specific lipase concentration from the calibration curve data. The control line is a reference line which indicates the test has been performed correctly.

MATERIALS PROVIDED

Reagent	10 Tests/Kit
① Vcheck cPL 2.0 test device	10
② Assay diluent tube	10
③ Disposable pipette tip	20
④ Instructions for use	1

MATERIALS REQUIRED, BUT NOT PROVIDED

- BIONOTE Vcheck Analyzer
- 25 μ l pipette
- 100 μ l pipette

STORAGE AND STABILITY

- Store the test kit at 1~30°C. **DO NOT FREEZE.**
- Do not store the test kit in the direct sunlight.
- The test kit is stable until the expiry date that is marked on the package label.

PRECAUTIONS

- The test kit is for canine use only. Do not use for other animals.
- The test device is sensitive to humidity and heat. Perform the test immediately after removing the test device from the foil pouch.
- Do not reuse test components.
- Do not touch the membrane in the result window of the test device.
- Do not use the test kit beyond the stated expiry date marked on the label.
- Do not use the test kit if the pouch is damaged or the seal is broken.
- Do not mix components from different lot numbers, the components in this kit have been quality control tested as a standard batch unit.
- All samples should be handled as being potentially infectious. Wear protective gloves while handling samples. Wash hands thoroughly afterwards.
- Decontaminate and dispose of all samples, used kits and potentially contaminated.

COLLECTION AND PREPARATION OF SAMPLE

- Canine serum should be used with this test.
- [Serum]** Collect the whole blood into a blood collection tube containing NO anticoagulant. Leave to settle for 30 minutes for blood coagulation and then centrifuge to get a serum supernatant.
- If serum samples are not tested immediately, they should be refrigerated at 2~8°C and used within 2 weeks. For longer storage, serum can be frozen (-20°C or colder). Frozen samples should be brought to room temperature (15~30°C) prior to use.

TEST PROCEDURE

All reagents and samples must be at room temperature (15~30°C) before use.

[Coding]

- Turn on V200 Analyzer and select "Standard Test".



- Remove the test device from the foil pouch. Once the "Insert Device" is displayed in the screen, insert the test device.



[Dilution of sample & Measurement]

- Using a 25 μ l pipette, draw 25 μ l of sample and add the sample into an assay diluent tube.



- Use a 100 μ l pipette to mix the sample with diluent by pipetting, for 5~6 times.



- Add the mixed sample (100 μ l) into the sample hole of the test device using the 100 μ l pipette and press the [START] to initiate testing.



* If the time to press [START] button is delayed, it may affect the test result.

- The V200 analyzer will display the test result on the screen after 5 minutes.
- Remove the test device.



INTERPRETATION OF THE RESULT

- Read the concentration value of canine pancreas-specific lipase appearing on the display of the BIONOTE Vcheck Analyzer. (50~2000 ng/mL)
- If "< 50 ng/mL" appears on the display, it means the concentration of canine pancreas-specific lipase in the specimen is less than 50 ng/mL.
- If "> 2000 ng/mL" appears on the display, it means the concentration of canine pancreas-specific lipase in the specimen is greater than 2000 ng/mL.

REFERENCE RANGE

< 200 ng/mL	200~400 ng/mL	> 400 ng/mL
Normal	Suspected	Consistent with pancreatitis

SCREEN MESSAGES AND TROUBLE SHOOTING

[V200]

Error message	Error description
Contaminated Device	The test device is damaged or inserted improperly. Solution: Discard the test device and retest with a new test device and a new specimen.
Insufficient Sample	An insufficient amount of blood has been applied. Solution: Retest with a new test device with enough specimen, ensuring that blood is placed in to the narrow channel in the top edge of the test device.
Expired Device	The test devices are expired. Solution: Retest with a new test device that is not expired.
Temperature Error	The environmental temperature is above or below the operating range of the analyzer. Solution: Move to an area in the acceptable temperature range for the analyzer and perform the test. Do not heat or cool the analyzer artificially.
Printer Connection Fail	The communication between analyzer and barcode or printer has failed. Solution: Reconnect the analyzer and external device. If the error continues after turning ON/OFF the analyzer, please contact BioNote, Inc.
Barcode Error	The measured total hemoglobin is out of the range of 7 to 23 g/dL. Solution: This error occurs when a specimen has a total hemoglobin in the abnormal range. If the error continues after turning ON/OFF the analyzer, please contact BioNote, Inc.
Extremely Total hemoglobin	The test is invalid. Solution: Retest with a new test device and a new patient specimen. If the error continues after turning ON/OFF the analyzer, please contact BioNote, Inc.
Result: Invalid	The calibration is overdue. Solution: If the error continues after turning ON/OFF the analyzer, please contact BioNote, Inc.
Calibration Overdue	Loading a test device that is not supported by the analyzer. Solution: Check whether the test device is manufactured by BioNote, Inc.
Not Supported Device	Internal error has occurred. Solution: If the error continues after turning ON/OFF the analyzer, please contact BioNote, Inc.
EEE	

PERFORMANCE CHARACTERISTIC

- Interference
Measurement was not influenced by interfering substances such as triglyceride, bilirubin. Especially, BIONOTE Vcheck cPL 2.0 can normally measure cPL under condition of less than 10 mg/dL of bilirubin in serum. (reference range of canine bilirubin is 0.1-0.3 mg/dL) However, extremely high bilirubin concentration may interfere with the test result. If the test results indicate "Invalid", we recommend to try a biochemistry assay for diagnosis of other diseases (example, liver disease etc.).
- Measuring Range
50~2000 ng/mL of canine pancreas-specific lipase is measurable in serum.
For > 2000 ng/mL results, samples may be diluted with PBS buffer and measured again for a numerical result. To calculate the final canine pancreas-specific lipase concentration, the measured result must be multiplied by the dilution factor.



[동물용 의약품]

제품명

면역화학검사시약 [2]

형명

Vcheck cPL (Canine pancreas-specific lipase) 2.0

제품의 구성품 및 포장 단위

구성품	5 Tests/Kit	10 Tests/Kit	20 Tests/Kit	50 Tests/Kit	100 Tests/Kit
검사용 디바이스	5	10	20	50	100
검체희석액	5	10	20	50	100
파이펫 팁	10	20	40	100	200
사용 설명서	1	1	1	1	1

사용 목적

Vcheck cPL는 개의 혈청에서 canine pancreas-specific lipase (이하 cPL)을 형광측정법으로 정량하는 동물용 체외진단분석기용 시약으로 동물병원 및 병성감정기관에서만 사용할 수 있다. (일반인 사용 금지)

사용 방법

[검체준비 및 저장방법]

- 개의 혈청을 검체로 사용하며, 검체 준비방법은 다음과 같다.
 - 1) 멸균된 주사기로 채혈한 혈액을 항응고제가 들어 있지 않은 튜브에 수집한다.
 - 2) 실온에 약 30분간 방치해 응고가 일어나도록 한 후 원심분리에 의해 상청의 혈청을 분리시킨다.
 - 3) 분리된 혈청은 2~8°C에서 보관시 2주간 사용가능하며, 장기 보관이 필요한 경우 -20°C 이하에서 냉동 보관한다.
 - 4) 혈구가 깨져 완전히 분리되지 않은 혈청은 검사결과에 영향을 줄 수 있으므로 검체준비에 유의하도록 한다.

* 2~8°C 혹은 -20°C이하에서 보관된 검체는 반드시 상온에 노출시킨 후 사용한다.


[검사 전 유의사항]

- 1) 검사용 디바이스는 온도 및 습기에 민감하므로 호일파우치에 포장된 상태로 실온에 30분 적응시킨 후 시험 시작 직전에 호일 파우치에서 꺼낸다.
- 2) 검사용 디바이스의 검사창은 손으로 만지지 않는다.
- 3) 검사용 디바이스가 포함되어 있는 호일 파우치가 손상되었을 경우 사용하지 않는다.
- 4) 키트의 구성물을 다른 로트와 혼용하여 사용하지 않는다.

[검사과정]

디바이스 확인

- ① BIONOTE 브이체크 분석기의 전원을 켜고, Standard Mode를 누른다.

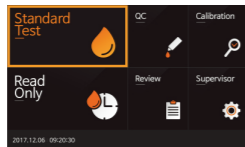


- ② 호일 파우치를 개봉하여 검사용 디바이스를 꺼내고, 기기에 삽입하여 기기가 디바이스의 바코드를 먼저 읽을 수 있도록 합니다.



검체 희석

- ① 희석액 튜브의 sealer를 제거한 후 25 μl 파이펫으로 25 μl의 검체를 취한 후 검체희석액에 넣는다

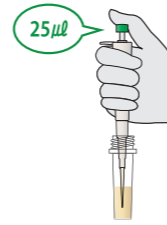

- ② 100 μl 파이펫을 이용하여 검체와 희석액이 잘 섞일 수 있도록 3~4회 혼합한다.



- ③ 100 μl 파이펫으로 혼합액 100 μl를 취하여 디바이스 점적 부위에 점적한 후 [START] 버튼을 눌러 검사를 시작한다.
* START 버튼을 누르는 시간이 지체될 경우 검사 결과에 영향을 미칠 수 있다.



- ④ 5분 후, 기기 표시창에 표시된 결과를 확인한다.
- ⑤ 측정이 완료되면, 사용했던 검사용 디바이스를 기기에서 제거한다.



*검체량 및 반응시간을 다르게 할 경우 시험결과에 영향을 줄 수 있으므로 정해진 양과 시간(5분)을 지켜 시험하도록 한다.

[결과판정]

- 1) cPL 농도 확인: 기기 결과 창에 농도가 표시된다. (50~2000 ng/ml)
- 2) < 50 ng/ml 값이 나온다면 검체농도가 50 ng/ml 미만이다.
- 3) > 2000 ng/ml 값이 나온다면 검체농도가 2000 ng/ml 초과이다.
- 4) Invalid 결과가 나오는 경우 재시험을 수행한다.

사용 시 주의사항

- 1) 개의 체외진단용으로만 사용한다.
- 2) 본 시약은 1~30°C에서 보관이 필요한 제품으로, 냉장보관한 경우에는 사용 시 키트에 포함된 각종 시약을 상온(15~30°C)에 충분히 적응시킨 후 검사를 진행하도록 한다.
- 3) 보관 중인 디바이스가 습기에 노출되면 제품의 성능이 저하될 수 있으므로 사용 직전에 개봉하고, 개봉 후 즉시 사용한다.
- 4) 반드시 각 검체마다 별개의 1회용 구성품을 사용한다.
- 5) 검사 디바이스의 표시창 내 멤브레인을 손으로 만지는 등의 직접적인 접촉은 검사 결과에 영향을 미칠 수 있다.
- 6) 검체량 및 반응시간을 해당 사용방법대로 지키지 않을 경우 부정확한 결과가 나올 수 있으므로 검체량 및 반응시간을 준수하여 시험하도록 한다.
- 7) 사용 기간이 경과한 시약은 사용하지 않는다.
- 8) 검체는 미지의 바이러스나 세균 감염원으로서의 위험성을 내포하고 있으므로 취급에 주의하며, 감염 가능한 물질의 취급 시에는 일회용 장갑을 사용하고 취급 후 손을 깨끗이 씻는다.
- 9) 실험에 사용한 고형 폐기물은 121°C에서 15분 이상 고압 증기 멸균하여 폐기한다.
- 10) 본 제제는 개 cPL에 관한 간이 정량 목적으로 고안된 시약으로 간편하고 신속한 방법으로 결과를 얻을 수 있으나, 보다 정밀한 원리로 고안된 검사법과 검출 감도면에서 차이를 보일 수 있다.
- 11) 반드시 전문 수의사가 사용해야 하며, 본 제품의 결과 및 다른 검사결과와 임상소견에 근거하여 최종 진단을 내려야 한다.
- 12) BIONOTE 브이체크 분석기는 15~30°C에서 사용을 권장한다.
- 13) 본 시약은 트라이글리세라이드와 빌리루빈 같은 체내 기본 함유 물질들에 의한 간섭현상이 발생하지 않는 것을 확인하였으며, 특히 빌리루빈의 경우 10 mg/dL 농도까지 검사 결과에 영향을 주지 않는 것을 확인하였다 (개 빌리루빈의 정상 농도범위는 0.1 - 0.3 mg/dL). 그러나 극단적으로 높은 검체 내 빌리루빈 농도는 검사 결과에 영향을 줄 수 있으며, 검사 결과가 지속적으로 "유효하지 않음(Invalid)"을 나타낼 경우 간 질환 등 다른 질환의 발생 가능성이 있으므로, 생화학적 분석 및 추가 질환 검사를 권장한다.

저장방법 및 사용기한

구성 시약	개봉 여부	보관 조건	사용 기간	비고
검사용 디바이스	미개봉 개봉	온도 1~30°C, 밀봉 보관 안됨	15 개월 -	완제품 즉시사용
검체희석액	미개봉 개봉	온도 1~30°C, 밀봉 보관 안됨	15 개월 -	완제품 즉시사용

※ 검사키트는 냉동보관하지 않도록 주의.

*참고 오류 메시지, 원인 및 조치 사항 [V100]

오류 메시지	원인 및 조치 사항
INVALID DEVICE	테스트가 유효하지 않음 조치 사항 : 새로운 디바이스 혹은 새로운 검체를 이용하여 재검사 및 기기 다시 시작
CONTAMINATED	손상된 디바이스 사용 및 부적절한 디바이스 삽입 조치 사항 : 새로운 디바이스를 이용하여 다시 검사
SAMPLE NOT DETECTED	검체 적적량 부족 조치 사항 : 새로운 디바이스에 알맞은 양의 검체를 적용
EXPIRED	디바이스 유효기한이 지남 조치 사항 : 유효기한이 지나지 않은 새 디바이스를 이용하여 다시 검사
TEMPERATURE	기기 혹은 디바이스의 온도가 매우 낮거나 높은 경우 조치 사항 : 기기 혹은 디바이스를 상온에 적정시간 인큐베이션한 후 검사
BARCODE	기기가 디바이스 바코드를 읽지 못함 조치 사항 : 기기 다시 시작
DEVICE	기기가 디바이스를 감지하지 못함 조치 사항 : 디바이스 다시 삽입 및 기기 다시 시작
PC	기기가 PC를 감지하지 못함 조치 사항 : PC 다시 연결 및 기기 다시 시작
PRINTER	기기가 외부 프린터를 감지하지 못함 조치 사항 : 외부 프린터 다시 연결 및 기기 다시 시작
EEE	내부 시스템 문제 조치 사항 : 기기 다시 시작

[V200]

오류 메시지	원인 및 조치 사항
Contaminated Device	손상된 디바이스 사용 및 부적절한 디바이스 삽입 조치 사항 : 새로운 디바이스 혹은 새로운 검체를 이용하여 다시 검사
Insufficient Sample	검체 적적량 부족 조치 사항 : 충분한 양의 검체로 새 디바이스를 이용하여 다시 검사
Expired Device	디바이스 유효기한 지남 조치 사항 : 유효기한이 지나지 않은 새 디바이스를 이용하여 다시 검사
Temperature Error	기기 혹은 디바이스의 온도가 매우 낮거나 높은 경우 조치 사항 : 기기 혹은 디바이스를 상온에 적정시간 인큐베이션한 후 검사
Printer Connection Fail	기기가 외부 프린터를 감지하지 못함 조치 사항 : 외부 프린터 재연결 및 기기 다시 시작
Barcode Error	기기가 바코드를 읽지 못함 조치 사항 : 기기 다시 시작
Extremely Total hemoglobin	측정된 총 헤모글로빈의 수치가 7 g/dL 이상 23 g/dL 이하 범위를 벗어나는 경우 조치 사항 : 기기 다시 시작
Result: Invalid	테스트가 유효하지 않음 조치 사항 : 새로운 디바이스 혹은 새로운 검체를 이용하여 재검사 및 기기 다시 시작
Calibration Overdue	검교정 기한이 지남 조치 사항 : 기기 다시 시작
Not Supported Device	기기가 지원하지 않는 디바이스 조치 사항 : BIONOTE에서 제조된 디바이스인지 확인
EEE	내부 시스템 문제 조치 사항 : 기기 다시 시작

문서번호 : IF129-1E/K
작성일자 : 2020. 03. 10